

新リフトアップ機能搭載

# バリケア ナチュラ Mフランジ アコーディオン デュラヘーシブ ナチュラ Mフランジ アコーディオン

新製品



## 浮動型の真打ち登場

嵌合圧を指でうけとめ、おなかにかけない



## リフトアップ機能

リフター（透明の蛇腹）が上方に伸展する事で  
指の第一関節（個人差があります）まで入るスペースを確保します  
フランジの直下まで指が入るためパウチとの嵌合が容易  
セルフケアできる方、ケアする方、双方が操作しやすいデザイン



## モルダブル テクノロジー™

隙間なく、漏れも少ない  
優れた皮膚保護剤が  
ストーマ近接部を強力に  
保護します。

指で成形、ハサミは不要



ハサミ不要でストーマサイズに  
自由に成形できます。

リバウンディングメモリー™



保護剤がストーマに向かって  
逆戻りし日々変化するストーマ  
との隙間を作りません。

タートルネック作用



シーリング効果が高くストーマ  
近接部の保護能力に優れています。

「アコーディオンシリーズ」なら誰にでも扱いやすく、装着も安心!

### ニューフローティング



面板はフィット+フランジは水平  
面板が腹壁の形状に合わせて屈曲  
してもフランジは独立して水平を保ち  
ます。山型のおなかやヘルニアの方  
にも反発せずしっかりフィットします。

\*外周テープは肌に優しいハイドロテープ

### ソフト・リム




グリップが効くワイドスペース  
嵌合の際に指を沿えるスペースが  
十分にあり、巧緻性の低い方、視力  
の弱い方でもグリップが効きます。  
ソフトな素材でHFS(ハンドフィット  
シンドローム)の方にも「あたり」が  
優しいデザインとなっています。

### スナップロック式嵌合



音でしっかり装着確認  
嵌合の際、パチっという音と感触で  
確認でき、誰にでも扱いやすく簡単  
なため安心して装着できます。ライフ  
スタイルや用途に合わせて豊富な  
ラインアップのナチュラシリーズの  
ストーマ袋を選択する事ができます。

## ② 皮膚保護剤の特徴

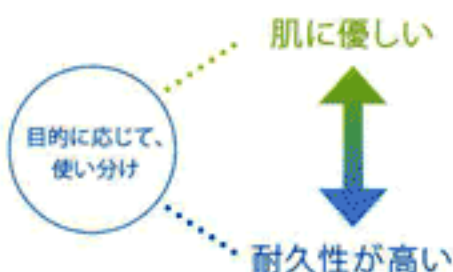

### バリケア(CPB系)

- 短期交換でも刺激が少なく、皮膚に優しく安心です。
- 水分を素早く吸収してゲル化するため、湿った皮膚にも粘着します。

### デュラヘーシブ(CPBS系)

- 水溶性排泄物のストーマ(イレオストミーやウロストミー)に最適です。
- 水分を吸収して膨潤し、ストーマとの隙間を埋めて、排泄物のもぐり込みを防ぎます。

注文番号	製品名	規格	ストーマサイズ	包装単位	標準価格
421030	バリケア ナチュラ Mフランジ アコーディオン	57mm	13-22mm	5枚/箱	¥3,500
421031	バリケア ナチュラ Mフランジ アコーディオン	57mm	22-33mm	5枚/箱	¥3,500
421032	バリケア ナチュラ Mフランジ アコーディオン	70mm	33-45mm	5枚/箱	¥3,500
421036	デュラヘーシブ ナチュラ Mフランジ アコーディオン	57mm	13-22mm	5枚/箱	¥5,000
421037	デュラヘーシブ ナチュラ Mフランジ アコーディオン	57mm	22-33mm	5枚/箱	¥5,000
421038	デュラヘーシブ ナチュラ Mフランジ アコーディオン	70mm	33-45mm	5枚/箱	¥5,000

上記はすべて非課税

™はConvaTec Inc.の商標です。© 2017 ConvaTec Inc.